

Quality time for better care


"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions

HOSPITAL CARE

Surshield™ Versatus™ -WP

Catéter I.V. con alas y puerto, con protector

Información del producto

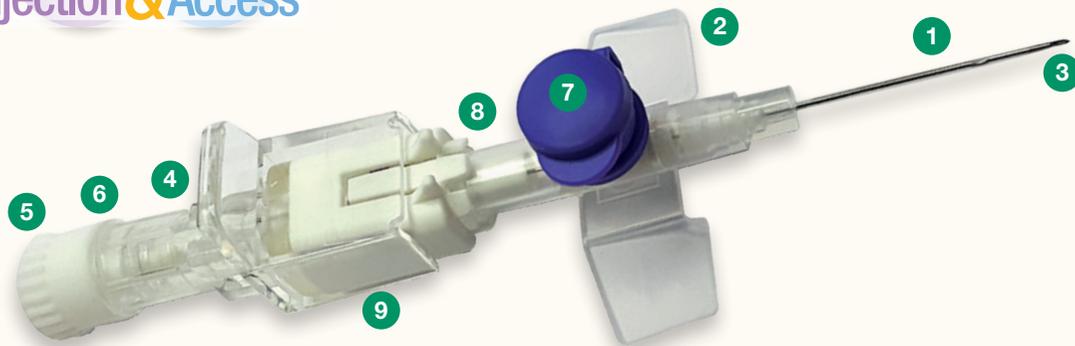

El protector Surshield permite cerrar completamente la aguja para evitar pinchazos accidentales al desechar la cánula intravenosa. El uso de un catéter de seguridad no requiere ningún cambio en la técnica de inserción.

Descripción	Materias primas
1 Catéter	Poliuretano + BaSO ₄
2 Cono del catéter con alas Clavija de sellado	Polipropileno Polioximetileno
3 Cánula (aguja interior)	Acero inoxidable
4 Cono de la aguja	Acrilonitrilo butadieno-estireno
5 Tapa con Luer Lock	Polipropileno
6 Filtro del accesorio de ventilación Cuerpo del accesorio de ventilación	Poliuretano Acrilonitrilo butadieno-estireno
7 Cierre del puerto	Polipropileno + lote maestro
8 Válvula del puerto de inyección	Tubo de silicona
Protector	Poliuretano
Protector Surshield	
9 Carcasa protectora	Poliuretano
Seguridad para los dedos	Polisulfona
Casquillo deslizante + bloqueador de la aguja	Policarbonato + tapa de acero inoxidable

Desarrollado y
fabricado por técnicos
cualificados en Europa

Sus catéteres preferidos, que forman parte de una gama de productos intravenosos más amplia

Gama de productos

Código de producto	Color	Ø exterior del catéter	Ø interior del catéter	Longitud del catéter	Velocidad del flujo ml/min	
SR+DS2619PD	Violeta	26G	0,64 mm	0,45 mm	19 mm	19
SR+DS2419PD	Amarillo	24G	0,74 mm	0,55 mm	19 mm	29
SR+DS2225PD	Azul	22G	0,90 mm	0,65 mm	25 mm	42
SR+DS2032PD	Rosa	20G	1,00 mm	0,75 mm	32 mm	59
SR+DS1832PD	Verde	18G	1,30 mm	0,95 mm	32 mm	103
SR+DS1845PD	Verde	18G	1,30 mm	0,95 mm	45 mm	96
SR+DS1745PD	Blanco	17G	1,50 mm	1,15 mm	45 mm	155
SR+DS1645PD	Gris	16G	1,75 mm	1,35 mm	45 mm	225
SR+DS1445PD	Naranja	14G	2,00 mm	1,55 mm	45 mm	290



Envases

Una unidad: envase blíster

Caja de unidades: 50 unidades

Caja de transporte: 200 unidades, Dimensiones: 390 x 384 x 180 mm

Esterilización

Con óxido de etileno para alcanzar un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10⁻⁶

Almacenamiento

- Vida útil de 5 años
- El número de lote y la fecha de caducidad están impresos en el papel del envase de la unidad
- No almacenar a temperaturas extremas ni en lugares húmedos

Precauciones

- No utilizar si el envase unitario está deteriorado
- No reutilizar ni reesterilizar
- No intente reinsertar una aguja que se haya retirado total o parcialmente
- Usar una vez y destruir para evitar el riesgo de infección
- El tiempo de aplicación debe ser acorde con las prácticas estándares aceptadas

Esta gama complementa la amplia oferta de productos de Terumo, incluido un completo catálogo de productos I.V. de seguridad y convencionales, que puede consultar en nuestra página web www.terumo-europe.com