CONEXIONES PACIENTE SUPERSET

Las conexiones paciente de tubo retráctil Superset permiten colocar el circuito en la posición más cómoda, gracias a su exclusiva concertina que guarda memoria.

Su diseño permite el ajuste del espacio muerto desde 20ml a 40ml (3504: 15-36ml), y regular su longitud desde los 70mm hasta los 150mm.

La gama de tubos retráctiles se acompaña con gran variedad de codos adaptables al paciente que proporcionan una rotación completa de 360º en dos puntos de su estructura. Se minimiza así el riesgo de traumatismo traqueal, al reducirse los tirones y torsiones sobre el tubo ET, mascarilla, etc.

TAPÓN DOBLE "FLIP TOP" (REF. I3521)

Nuevo tapón doble, exclusivo de INTERSURGICAL, que incluye un puerto de 9,5mm y otro de 7,6mm sellable integrado en el mismo tapón. Además, la carcasa externa del tapón pasa a ser rígida para mantener mejor la presión en el sistema y evitar aperturas accidentales a altos flujos y/o presiones. El tapón "Flip Top" se puede abrir con una sola mano, lo que facilita su manipulación.

CONEXIONES AL PACIENTE DOBLES 22M/15F

Posibilitan la conexión de todos los codos tanto a vías aéreas 15M como a mascarillas 22F.

CONEXIONES SEGURAS

Según las normas BS 3879 e ISO 5356, ISO 5367.


CONTROL DE CALIDAD

En el 100% de las unidades producidas.

ENVASADO INDIVIDUAL

Para mayor higiene y comodidad de uso.



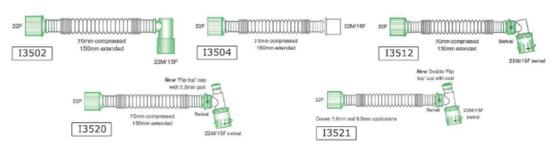



REF.	DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA
13502	Conexión paciente retráctil con codo fijo 22F-22M/15F	75
13504	Conexión paciente retráctil recta 22F-22M/15F	75
I3512	Conexión paciente retráctil con codo de doble giro 22F-22M/15F	75
13520	Conexión paciente retráctil con codo de doble giro y puerto de 7.6mm con tapón "Flip Top" 22F-22M/15F	75
I3521	Conexión paciente retráctil con codo de doble giro y doble puerto sellable con tapón "Flip Top" 22F-22M/15F	75

IN-49 Conexiones paciente Superset pediatria y neonatos 15/07/2011