



Salvafast Transfer es un innovador sistema para una rápida y segura contención y transferencia de pacientes alterados, violentos, agresivos o desorientados, para camillas de emergencia. Permite, en situaciones de emergencia, la transferencia del paciente a otra camilla o cama sin necesidad de liberar la contención. Está formado por una resistente base deslizante con un conjunto de arneses, muñequeras y tobilleras con sistema de cierre de doble Velcro®. Está fabricado en una sola pieza y especialmente diseñado para la utilización en todo tipo de camillas de emergencia.

SALVAFAST TRANSFER

CARACTERÍSTICAS

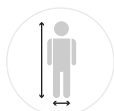

Talla Universal
Adaptable a todo tipo de pacientes

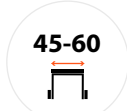


45-60
Adaptable a camillas de 45 a 60 cm de ancho



2500N
255Kg
Testado según punto 5.4.1 de UNE-EN1865-1:2010+A1:2015
Equipos para el transporte de pacientes utilizados en ambulancias de carretera.



Arnés con cierres clip de seguridad (3 puntos)

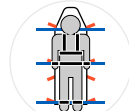

Cintas con código de color:

Fijación camilla

Asas

Fijación paciente



Enrollable para un montaje y almacenaje fácil y rápido (Bolsa incluida)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFAST

NOMBRE DE PRODUCTO: SALVAFAST Transfer

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)		
	Lona	Muñequeras	Tobilleras
SVT3710	172 x 45	15 - 30	20 - 40

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar el producto a mano después de cada uso con un trapo húmedo y una solución de etanol o isopropanol. El producto permite el uso de desinfectantes de superficies.

- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco
- No usar suavizante, cloro, ni blanqueadores.



El producto puede ser lavado a máquina hasta 60°C si se requiere. No obstante, puede agravar el deterioro del producto.

USO PREVISTO: Contención rápida de pacientes alterados, violentos, agresivos o desorientados en camillas de emergencia. Permite transportar el paciente en situaciones de emergencia y transferirlo de una camilla a una cama con el mínimo esfuerzo.

COLOR

Lona: ● Negro
● Naranja

Cintas: ● Azul
● Naranja
● Negro

COMPOSICIÓN

Sujeciones: 80% PES - 20% Neopreno

Lona: 50% PVC - 50% Poliamida

Cierres clip: Acetal (POM)

LIBRE DE LÁTEX

RECOMENDACIONES DE DESINFECCIÓN

- Siga los protocolos de desinfección habituales.
- Use detergente o toallitas desinfectantes de superficies.
- Puede usar soluciones acuosas de etanol y isopropanol
- Lavado máquina a 60°C usando un detergente desinfectante.

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafast Transfer
- 1 - Bolsa de almacenaje