

Quality time for better care


"Quality time for better care" is the brand promise of Terumo Medical Care Solutions

HOSPITAL CARE

Versatus - WP

Catéter I.V. con alas y puerto

Información del producto

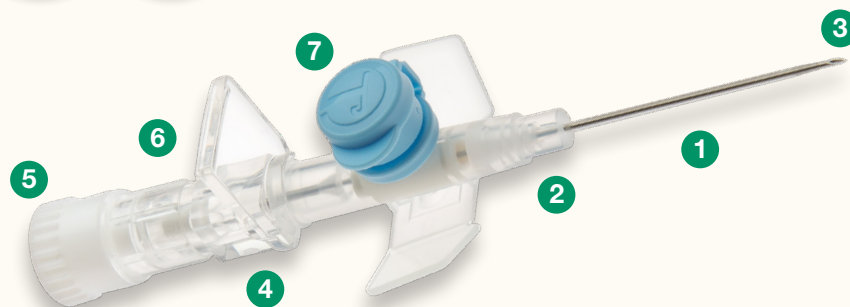

Diseñado y
fabricado por técnicos
especializados en Europa

- La cámara de reflujo confirma visualmente que el catéter se ha insertado correctamente en la vena
- La punta afilada de la aguja minimiza los traumatismos en el vaso sanguíneo durante el uso
- Gama completa de 14G a 26G

Descripción		Materias primas
1	Catéter	Poliuretano
2	Cono del catéter con alas Clavija de sellado	Polipropileno Polioximetileno
3	Cánula (aguja interna)	Acero inoxidable
4	Cono de la aguja	Copolímero de estireno-butadieno
5	Tapa con Luer Lock	Polipropileno
6	Filtro del accesorio de ventilación	Poliétileno
	Cuerpo del accesorio de ventilación	Copolímero de estireno-butadieno
7	Cierre del puerto Válvula del puerto de inyección	Polipropileno + lote maestro Caucho de silicona
	Protector	Poliétileno
	Envase unitario	Papel de la tapa con revestimiento adhesivo. Película para blíster termoformable: polietileno laminado / complejo de polipropileno

No contiene componentes de PVC o de látex de caucho natural.

Sus catéteres de referencia para una amplia gama de aplicaciones I.V.

Gama de productos

Código de producto	Color	Ø exterior del catéter		Ø interior del catéter	Longitud del catéter	Velocidad del flujo ml/min
SR+DU2619PD	Violeta 	26G	0,64 mm	0,45 mm	19 mm	19
SR+DU2419PD	Amarillo 	24G	0,74 mm	0,55 mm	19 mm	29
SR+DU2225PD	Azul 	22G	0,90 mm	0,65 mm	25 mm	42
SR+DU2032PD	Rosa 	20G	1,00 mm	0,75 mm	32 mm	59
SR+DU1832PD	Verde 	18G	1,30 mm	0,95 mm	32 mm	103
SR+DU1845PD	Verde 	18G	1,30 mm	0,95 mm	45 mm	96
SR+DU1745PD	Blanco 	17G	1,50 mm	1,15 mm	45 mm	155
SR+DU1645PD	Gris 	16G	1,75 mm	1,35 mm	45 mm	225
SR+DU1445PD	Naranja 	14G	2,00 mm	1,55 mm	45 mm	290



Envases

Una unidad: envase blíster

Caja de unidades: 50 unidades

Caja de transporte: 500 unidades, Peso bruto: ±4.5 kg

Dimensiones: ± 385 x 379 x 170 mm

Estado regulatorio

Certificación CE: producto sanitario de Clase IIa

Entidad notificada

TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)

Esterilización

Con óxido de etileno para alcanzar un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10⁻⁶

Almacenamiento

- Vida útil de 5 años
- El número de lote y la fecha de caducidad están impresos en el papel del envase de la unidad
- Mantener alejado de la directa del sol y del calor.
- Mantener seco
- Frágil, manipular con cuidado

Precauciones

- No utilizar si el envase está dañado y consulte instrucciones de uso
- No reutilizar ni reesterilizar
- No intente reinsertar una aguja que se haya retirado total o parcialmente
- Usar una vez y destruir para evitar el riesgo de infección
- El tiempo de aplicación debe ser acorde con las prácticas estándares aceptadas

Consulte siempre la etiqueta del producto y las instrucciones de uso para una visión completa de las advertencias, precauciones y/o precauciones antes de utilizar el producto.